



HORSE DENTAL  
EQUIPMENT

Équipement motorisé  
conçu pour la dentisterie équine



CATALOGUE  
2025-2026





**HORSE DENTAL  
EQUIPMENT**

## SOMMAIRE

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>SETS COMPLETS MOTORISÉS</b>                  | <b>page 4</b>  |
| <b>ÉQUIPEMENT ÉLECTROPORTATIF</b>               | <b>page 10</b> |
| <b>FLEXXIDISC</b>                               | <b>page 16</b> |
| <b>POLYFLOAT</b>                                | <b>page 18</b> |
| <b>DENTALSCOPE ÉQUIN</b>                        | <b>page 28</b> |
| <b>STOMATOLOGIE</b>                             | <b>page 32</b> |
| <b>DIAGNOSTIC</b>                               | <b>page 33</b> |
| <b>EXTRACTION DENTS DE LOUP &amp; INCISIVES</b> | <b>page 36</b> |
| <b>EXTRACTION MOLAIRES</b>                      | <b>page 42</b> |
| <b>OUVRE-BOUCHES &amp; ACCESSOIRES</b>          | <b>page 47</b> |
| <b>RÂPES MANUELLES</b>                          | <b>page 52</b> |
| <b>ACCESSOIRES</b>                              | <b>page 55</b> |
| <b>RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN</b>              | <b>page 60</b> |

# Garantie commerciale HDE

## 1. CONTEXTE

En complément de la Garantie Légale, HORSE DENTAL EQUIPMENT (HDE) offre aux praticiens une Garantie Commerciale HDE qui s'applique à tout matériel électroportatif neuf à la marque HDE acheté par un praticien auprès de HDE ou l'un de ses distributeurs officiels à partir du 1<sup>er</sup> mai 2024 et qui remplace les précédentes conditions.

## 2. DÉFINITION

### a) 1<sup>ère</sup> année : Révision et Réparations Complémentaires

HDE garantit au praticien toute casse de son matériel électroportatif de la marque HDE pendant une durée de 12 mois, à compter de sa date d'achat. Cette garantie s'applique aux pièces cassées, à la main d'œuvre et aux frais de transport.

### b) 2<sup>ème</sup> année : Révision Annuelle Complémentaire

Pour augmenter la durée de vie de votre équipement, HDE offre pendant 12 mois supplémentaires une révision gratuite qui comprend les éléments suivants :

- Test complet du matériel
- Démontage
- Contrôle : roulements, engrenages, joints, câbles de transmission, disque diamanté, connexions électriques, ressorts
- Nettoyage
- Graissage
- Remontage

La main d'œuvre de révision est offerte, les frais administratifs et de transport restent à la charge du praticien.

Si des réparations sont nécessaires, les pièces, la main d'œuvre de réparation, les frais administratifs et de transport restent à la charge du praticien. Dans ce cas, un devis sera envoyé pour acceptation avant toute réparation.

Après cette période de 2 ans suivant la date d'achat, les frais de main d'œuvre (pour la révision et les réparations), les frais administratifs et de transport sont à la charge du praticien.

### c) Garantie Commerciale SAV

Toute réparation effectuée par HDE sur du matériel électroportatif de la marque HDE est garantie 3 mois.

Cette garantie couvre :

- Les pièces cassées remplacées au cours des 3 mois précédents
- La main d'œuvre pour le remplacement de ces pièces
- Les frais de transport

### d) Prêt de Matériel HDE

Horse Dental Equipment vous offre la possibilité d'utiliser un équipement de prêt pendant la maintenance programmée de votre équipement motorisé HDE. Pour demander un prêt d'équipement, veuillez visiter notre site web.

<https://www.horse-dental-equipment.com/services/free-loan-equipment/>

Le matériel de prêt sera envoyé dans les deux jours ouvrables suivant la réception du contrat de prêt complété et signé, en fonction de la disponibilité. HDE ne garantit pas la disponibilité du matériel de prêt à un moment donné et n'assume aucune responsabilité en cas d'indisponibilité. Le matériel de prêt est fourni selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Les frais de prêt sont supprimés si le client renvoie l'équipement prêté dans les deux jours suivant la réception de l'équipement réparé.

Les frais de transport, d'administration et de nettoyage sont à la charge du praticien.

## 3. MISE EN OEUVRE

### a) Enregistrement du matériel

La Garantie Commerciale Produits est valable uniquement à condition que les produits HDE soient enregistrés sur le site internet HDE dans les 15 jours suivant la date d'achat par un praticien auprès de HDE ou l'un de ses distributeurs officiels.

<https://www.horse-dental-equipment.com/services/warranty-register-equipment/>

### b) Exclusions

La garantie s'applique sur l'ensemble du matériel électroportatif de la marque HDE sauf :

A – En cas de dommage dû à un accident

B – En cas de dommage causé par l'utilisateur

C – En cas de non respect des conditions normales d'utilisation décrites dans les notices d'utilisation et/ou recommandations d'entretien HDE

<https://www.horse-dental-equipment.com/wp-content/uploads/2021/02/General-Cleaning-Recommandations-GB.pdf>

D – Si le numéro de série de l'appareil a été enlevé ou modifié

E – Si le produit n'a pas été démonté dans un Centre Technique Officiel HDE ou modifié avec des pièces détachées non-HDE

F – Si le produit n'a pas été enregistré sur le site internet HDE dans les 15 jours suivant la date d'achat par le praticien

G – Veuillez noter que pour les gammes Pegasos et Swissfloat, seule la Garantie Légale s'applique, la Garantie Commerciale est exclue

Note : HDE se réserve le droit de modifier à tout moment les conditions des garanties commerciales.

# SETS COMPLETS MOTORISÉS



# Sets complets motorisés

Sets Compact

## SET NIVEAU 1 - COMPACT

SET\_L1C

- Moteur N1 (ensemble complet)
- Flexible 1,20 m Quickflex (agrafes inox)
- Flexxidisc COMPACT longue courbe twist
- Brosse inox avec support
- Mallette à instruments



## SET NIVEAU 2 - COMPACT

SET\_L2C

- Moteur Evolution avec veste légère
- Flexible 1,20 m Quickflex Evolution
- Flexxidisc COMPACT longue courbe twist
- Brosse inox avec support
- Mallette Trolley sans plaque de fond pour fraises (disponible en option)



Également disponible en version Watercooling  
SET\_L2CIR



Bénéficiez de la remise sur les sets de 5%  
également appliquée en incluant le(s) produit(s) suivant(s) dans votre set :



Fraise disque (coupante)



Fraise disque



Fraise pour  
les 6<sup>èmes</sup>



Batterie Lithium  
Ion Evolution



Fourreau pour moteur  
Evolution ou moteur N1



COMPACT - Fraise  
Reverse Disc



Plaque de fond pour  
fraises (mallette Trolley)

# Sets complets motorisés

Sets Compact

## SET NIVEAU 3 - COMPACT

SET\_L3C

- Moteur Evolution avec veste légère
- Flexible 1,20 m Quickflex Evolution
- Flexxidisc COMPACT longue courbe twist
- Polyfloat COMPACT longue droite (sans bobine)
- COMPACT - Fraise bobine Ø14
- Brosse inox avec support
- Mallette Trolley sans plaque de fond pour fraises (disponible en option)



Également disponible en version Watercooling  
SET\_L3CIR



## SET NIVEAU 4 - COMPACT

SET\_L4C

- Moteur Evolution avec veste légère
- Flexible 1,20 m Quickflex Evolution
- Flexxidisc COMPACT longue courbe twist
- Polyfloat COMPACT longue droite (sans bobine)
- COMPACT - Fraise bobine Ø14
- COMPACT - Fraise occlusale
- COMPACT - Fraise diastème longue
- COMPACT - Fraise conique longue
- Fraise 11<sup>èmes</sup> - Longue droite avec carter de protection fermé
- Brosse inox avec support
- Mallette Trolley sans plaque de fond pour fraises (disponible en option)



Également disponible en version Watercooling  
SET\_L4CIR



Bénéficiez de la remise sur les sets de 5%  
également appliquée en incluant le(s) produit(s) suivant(s) dans votre set :



Fraise disque (coupante)



Fraise disque



Fraise pour  
les 6<sup>èmes</sup>



Batterie Lithium  
Ion Evolution



Fourreau pour moteur  
Evolution ou moteur N1



COMPACT - Fraise  
Reverse Disc



Plaque de fond pour  
fraises (mallette Trolley)

# Sets complets motorisés

Sets Classic

## SET NIVEAU 1 - CLASSIC

### SET\_L1

- Moteur N1 (ensemble complet)
- Flexible 1,20 m Quickflex (agrafes inox)
- Flexxidisc CLASSIC longue courbe twist
- Brosse inox avec support
- Mallette à instruments



## SET NIVEAU 2 - CLASSIC

### SET\_L2

- Moteur Evolution avec veste légère
- Flexible 1,20 m Quickflex Evolution
- Flexxidisc CLASSIC longue courbe twist
- Brosse inox avec support
- Mallette Trolley sans plaque de fond pour fraises (disponible en option)



Également disponible en version Watercooling\*  
SET\_L2IR\*



Bénéficiez de la remise sur les sets de 5%  
également appliquée en incluant le(s) produit(s) suivant(s) dans votre set :



Fraise disque (coupante)



Fraise disque



Fraise pour  
les 6<sup>èmes</sup>



Batterie Lithium  
Ion Evolution



Fourreau pour moteur  
Evolution ou moteur N1



COMPACT - Fraise  
Reverse Disc



Plaque de fond pour  
fraises (mallette Trolley)

\* Disponible jusqu'à épuisement du stock.

# Sets complets motorisés

Sets Classic

## SET NIVEAU 3 - CLASSIC

SET\_L3

- Moteur Evolution avec veste légère
- Flexible 1,20 m Quickflex Evolution
- Flexxdisc CLASSIC longue courbe twist
- Polyfloat CLASSIC longue droite (sans bobine)
- CLASSIC - Fraise bobine Ø14
- Brosse inox avec support
- Mallette Trolley sans plaque de fond pour fraises (disponible en option)



Également disponible en version Watercooling\*  
SET\_L3IR\*



## SET NIVEAU 4 - CLASSIC

SET\_L4

- Moteur Evolution avec veste légère
- Flexible 1,20 m Quickflex Evolution
- Flexxdisc CLASSIC longue courbe twist
- Polyfloat CLASSIC longue droite (sans bobine)
- CLASSIC - Fraise bobine Ø14
- CLASSIC - Fraise occlusale
- CLASSIC - Fraise diastème longue
- CLASSIC - Fraise conique longue
- Fraise pour 11<sup>èmes</sup> - Longue droite avec carter de protection fermé
- Brosse inox avec support
- Mallette Trolley sans plaque de fond pour fraises (disponible en option)



Également disponible en version Watercooling\*  
SET\_L4IR\*



Bénéficiez de la remise sur les sets de 5%  
également appliquée en incluant le(s) produit(s) suivant(s) dans votre set :



Fraise disque (coupante)



Fraise disque



Fraise pour  
les 6<sup>èmes</sup>



Batterie Lithium  
Ion Evolution



Fourreau pour moteur  
Evolution ou moteur N1



COMPACT - Fraise  
Reverse Disc



Plaque de fond pour  
fraises (mallette Trolley)

\* Disponible jusqu'à épuisement du stock.

# Sets complets motorisés

## Sets

|                                            | SET NIVEAU 1<br>COMPACT OU CLASSIC | SET NIVEAU 2<br>COMPACT OU CLASSIC | SET NIVEAU 3<br>COMPACT OU CLASSIC | SET NIVEAU 4<br>COMPACT OU CLASSIC |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |
| <br>Moteur N1                              | ✓                                  |                                    |                                    |                                    |
| <br>Flexible 1,20 m                        |                                    |                                    |                                    |                                    |
| <br>Moteur EVOLUTION - Flexible 1,20 m     |                                    | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |
| <br>Flexxdisc Longue Courbe Twist          | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |
| <br>Polyfloat Longue Droite (sans bobine)  |                                    |                                    | ✓                                  | ✓                                  |
| <br>Bobine Ø14 pour Polyfloat              |                                    |                                    | ✓                                  | ✓                                  |
| <br>Fraise Occlusale pour Polyfloat        |                                    |                                    |                                    | ✓                                  |
| <br>Fraise Conique pour Polyfloat          |                                    |                                    |                                    | ✓                                  |
| <br>Fraise Longue Versatile pour Polyfloat |                                    |                                    |                                    | ✓                                  |
| <br>Fraise pour les 11 <sup>èmes</sup>     |                                    |                                    |                                    | ✓                                  |
| <br>Brosse inox avec support               | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |
| <br>Mallette à instruments standard        | ✓                                  |                                    |                                    |                                    |
| <br>Mallette Trolley                       |                                    | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |

Bénéficiez de la remise sur les sets de 5% également appliquée en incluant les(s) produit(s) suivant(s) dans votre set :



Fraise disque (coupante)



Fraise disque



Fraise pour les 6<sup>èmes</sup>



Batterie Lithium Ion Evolution



Fourreau pour moteur Evolution ou moteur N1



COMPACT - Fraise Reverse Disc



Plaque de fond pour fraises (mallette Trolley)

Note: L'option Watercooling est disponible uniquement avec les fraises Compact.

# ÉQUIPEMENT ÉLECTROPORTATIF



# Équipement électroportatif

Moteur EVOLUTION

## MOTEUR EVOLUTION (ensemble complet avec veste)

MEV\_HDEBVEU

**Sans fil** : travaillez où et quand vous le souhaitez.

**Autonomie** : batterie puissante pour une pratique quotidienne (environ 10 chevaux).

**Sécurité** : l'embrayage électronique protège votre équipement.

**Confort et ergonomie** : répartition optimale du poids sur les épaules et autour de la taille.

## VESTE EVOLUTION

ME\_VME

- Poids : seulement 400 g
- Facile à mettre et à retirer
- Câbles protégés
- Matière respirante
- Lavable en machine à 30°C

## VESTE EVOLUTION LÉGÈRE

ME\_VMEL

Veste légère pour le moteur Evolution avec bretelles et ceintures amovibles.



## BLOC MOTEUR

MEV\_BMEV

- Moteur 24V basse tension
- 6 vitesses (2300 à 6700 tours/min)
- Poids : 600 g



## BATTERIE LITHIUM ION

MEV\_BLIE

- Batterie Lithium Ion
- Autonomie : 10 chevaux
- Temps de charge complet : 1h30
- Poids : 815 g



## CHARGEUR DE BATTERIE

MEV\_CBEE

Disponible en version Britannique, Australienne et Etats-Unienne.

## BOÎTIER DE COMMANDE

MEV\_BCEP

Boîtier de commande avec embrayage intégré et 3 débits d'eau différents pour le Watercooling.

# Équipement électroportatif

## FLEXIBLES QUICKFLEX EVOLUTION

- Renforcé et silencieux
- Qualité inox alimentaire
- Sans agrafes

Flexibles EVOLUTION



**Longueur 1 m**

FLEX\_R90SQE

**Longueur 1,20 m**

FLEX\_R120SQE

**Longueur 1,60 m**

FLEX\_R160SQE



Système de fixation rapide Quickflex adapté à toutes nos fraises.  
Grâce à l'embrayage intégré au boîtier de contrôle, plus besoin d'agrafes.

Accessoires EVOLUTION

## FOURREAU POUR MOTEUR EVOLUTION

ACC\_FEVO



## CHARGEUR VOITURE

MEV\_CVBE



Permet le chargement de la batterie lors de vos trajets.

## TRANSFORMATEUR

MEV\_TEFR



## PÉDALE EVOLUTION

MEV\_PEVV

Vitesse variable.



# Équipement électroportatif

Le Watercooling est une option pouvant s'adapter sur le moteur Evolution. Il a été conçu pour réduire l'échauffement lors du nivellement dentaire et pour limiter la diffusion des poussières de dentine.

## KIT WATERCOOLING

KIT\_KWCVMES

- Contenance : 1,25 L



Watercooling



## FLEXIBLES QUICKFLEX WATERCOOLING

- Flexible renforcé 1 m silencieux Quickflex Watercooling
- Flexible renforcé 1,20 m silencieux Quickflex Watercooling
- Flexible renforcé 1,60 m silencieux Quickflex Watercooling

FLEX\_R90SQEIR  
FLEX\_R120SQEIR  
FLEX\_R160SQEIR

## FLEXIDISC - WATERCOOLING

- Flexxidisc Compact longue droite FRA\_FCDDIR
- Flexxidisc Compact longue courbe twist FRA\_FCDCIR
- Flexxidisc Classic longue droite twist FRA\_GF7IR\*
- Flexxidisc Classic longue courbe twist FRA\_GF8TIR\*



## SYSTÈME DE PURGE POUR FRAISES WATERCOOLING

FRA\_SPFCIR

Cet outil vous permet de nettoyer le câble interne de votre fraise Watercooling et d'éliminer les résidus.




## POLYFLOAT - WATERCOOLING

- Polyfloat Compact longue droite (sans bobine) FRA\_FCPDIR
- Polyfloat Compact longue courbe twist (sans bobine) FRA\_FCPCIR
- Polyfloat Classic longue droite twist (sans bobine) FRA\_GPOLYV2IR\*
- Polyfloat Classic longue courbe twist (sans bobine) FRA\_GPOLYCV2IR\*



2 manches faciles d'entretien pour fraises Compact :

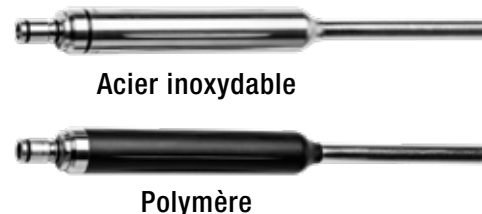

Acier inoxydable

Polymère

\* Disponible jusqu'à épuisement du stock.

# Équipement électroportatif

- Puissant** : pour une pratique régulière de la dentisterie équine.  
**Simplicité** : léger et porté à la ceinture, il facilite les mouvements.  
**Vitesse variable** : le praticien adapte la vitesse au besoin de son traitement.  
**Versatile** : fonctionne avec tout type de fraise HDE.

Moteur N1

## MOTEUR N1 (ensemble complet)

MOT\_1CREU

- Moteur N1 220V (disponible en 110V)
- 4000 à 9000 tours/min
- Fourni avec 1 ceinture et 1 rallonge

Version Europe (disponible en version Britannique).



## FLEXIBLES QUICKFLEX POUR MOTEUR N1

- Système de fixation rapide Quickflex adapté à toutes nos fraises
- Fonctionne avec agrafes
- Qualité inox alimentaire
- Disponible en 1,20 m - 1,60 m



1,20 m

Avec agrafes inox

FLEX\_R120SQAI

1,60 m

Avec agrafes inox

FLEX\_R160SQAI

## AGRAFES DE SÉCURITÉ POUR LE FLEXIBLE



FLEX\_INOX



FLEX\_LAIT

### AGRAFES INOX

Sachet de 20 agrafes

Recommandées avec les Flexxidisc & Polyfloat.

### AGRAFES LAITON

Sachet de 50 agrafes

Recommandées avec toutes les fraises à axe.

# Équipement électroportatif

## Accessoires Moteur N1

### QUICK AGRAFES

FLEX\_QA

- Qualité aluminium
- Le Quick agrafes permet de remplacer les agrafes très simplement
- Agrafes vendues séparément

Réserve d'agrafes



### EMBRAYAGE

FRA\_LCV3

- L'embrayage est un système de protection du moteur N1 et du flexible
- Poids : 165 g

Grâce à l'embrayage, votre moteur et votre flexible sont protégés et plus besoin de changer les agrafes.



Flexible



Embrayage



Fraise

### FOURREAU POUR MOTEUR N1

ACC\_FN1



### PÉDALE ÉLECTRIQUE AVEC VARIATEUR

MOT\_1PCEU



Référence pédale seule : MOT\_006

# Équipement électroportatif

## Flexxidisc Compact

La Flexxidisc est une fraise polyvalente parfaitement adaptée pour un travail de nivellement efficace des surdents ainsi que pour le profilage de routine. Elle existe en différentes formes et tailles adaptées à toutes les pratiques en dentisterie.

- Disque diamanté de haute qualité ( $\pm$  900 chevaux).
- Le diamant minimise les dommages aux muqueuses.
- La petite hauteur de la tête facilite le travail sur les 11<sup>èmes</sup>.
- La tête rotative à 360° permet un accès optimal des parties à traiter (sur version courbe uniquement).
- La version courbe suit la forme naturelle de la mâchoire, permettant un meilleur accès en fond de bouche.
- Facilité d'entretien (pas de graissage nécessaire).

### FLEXXIDISC COMPACT DROITE - POIGNÉE INOX

FRA\_FCDD

- Poids : 639 g
- Longueur : 52 cm



### FLEXXIDISC COMPACT COURBE TWIST - POIGNÉE INOX

FRA\_FCDC

- Poids : 639 g
- Longueur : 52 cm



### FLEXXIDISC COMPACT DROITE - POIGNÉE POLYMÈRE

FRA\_PFCDD

- Poids : 503 g
- Longueur : 52 cm



### FLEXXIDISC COMPACT COURBE TWIST - POIGNÉE POLYMÈRE

FRA\_PFCDC

- Poids : 503 g
- Longueur : 52 cm



## FLEXXIDISC CLASSIC STANDARD DROITE

FRA\_F7

- Longueur : 32 cm



## FLEXXIDISC CLASSIC LONGUE DROITE

FRA\_GF7

- Poids : 870 g  
- Longueur : 54 cm



## FLEXXIDISC CLASSIC STANDARD COURBE TWIST

FRA\_F8T

- Longueur : 32 cm



## FLEXXIDISC CLASSIC LONGUE COURBE TWIST

FRA\_GF8T

- Poids : 870 g  
- Longueur : 54 cm



Les Flexxidisc Classic sont également disponibles avec les disques diamantés suivants :



Petit Disque Ø28  
Diamant Grain 3



Disque Standard Ø32  
Diamant Grain 2



Disque Standard Ø32  
Diamant Grain 3

# Équipement électroportatif

## Polyfloat Compact

La Polyfloat est un outil très polyvalent permettant un traitement global des soins dentaires, du profilage de routine jusqu'au traitement des caries et diastèmes grâce à une gamme complète de 10 fraises différentes (la Polyfloat est livrée sans fraise).

Elle existe en différentes formes et tailles adaptées à toutes les pratiques de dentisterie.

- La tête rotative à 360° permet un accès optimal des parties à traiter (système Twist sur version courbe uniquement).
- La version courbe suit la forme naturelle de la mâchoire, permettant un meilleur accès en fond de bouche.
- 10 fraises Classic et 8 fraises Compact sont disponibles pour tout type de traitement (profilage, caries, diastèmes).
- Facilité d'entretien (pas de graissage nécessaire).

## POLYFLOAT COMPACT DROITE - POIGNÉE INOX

FRA\_FCPD

- Poids (sans bobine) : 623 g
- Longueur : 52 cm



## POLYFLOAT COMPACT COURBE TWIST - POIGNÉE INOX

FRA\_FCPC

- Poids (sans bobine) : 623 g
- Longueur : 52 cm



## POLYFLOAT COMPACT DROITE - POIGNÉE POLYMÈRE

FRA\_PFCPD

- Poids (sans bobine) : 487 g
- Longueur : 52 cm



## POLYFLOAT COMPACT COURBE TWIST - POIGNÉE POLYMÈRE

FRA\_PFCPC

- Poids (sans bobine) : 487 g
- Longueur : 52 cm



# Équipement électroportatif

Polyfloat Classic

Photos non-contractuelles : bobines vendues séparément.

## POLYFLOAT CLASSIC STANDARD DROITE

FRA\_POLYV2

- Longueur : 32 cm



## POLYFLOAT CLASSIC LONGUE DROITE

FRA\_GPOLYV2

- Poids (sans bobine) : 851 g
- Longueur : 54 cm



## POLYFLOAT CLASSIC STANDARD COURBE TWIST

FRA\_POLYCV2

- Longueur : 32 cm



## POLYFLOAT CLASSIC LONGUE COURBE TWIST

FRA\_GPOLYCV2

- Poids (sans bobine) : 851 g
- Longueur : 54 cm



# Équipement électroportatif

Les 10 fraises pour Polyfloat Classic HDE bénéficient d'une diamantation de haute qualité ( $\pm$  900 chevaux).

Le diamant minimise les dommages aux muqueuses.

La gamme HDE est composée de 3 types de fraises :

Fraises pour Polyfloat Classic

## FRAISES BOBINES CLASSIC

Les fraises bobines sont idéalement conçues pour un travail de nivellement, en particulier sur les 11<sup>èmes</sup> (Ø14), pour le profilage des 6<sup>èmes</sup> ainsi que pour le profilage de finition. HDE propose une gamme de 4 bobines de diamètres et de formes différentes.



FRA\_B14V2  
Ø14 mm



FRA\_B18V2  
Ø18 mm



FRA\_B22V2\*  
Ø22 mm



FRA\_FO  
Ø16 mm

## FRAISES CRIES CLASSIC

HDE propose 2 fraises de tailles et de formes différentes, développées spécialement pour le traitement des caries.



FRA\_COLV2  
Longueur : 15 mm  
Ø3 mm



FRA\_COCV2\*  
Longueur : 9 mm  
Ø3 mm

## FRAISES DIASTÈMES CLASSIC

HDE propose une gamme de 5 fraises diastèmes de diamètres et de dimensions différentes, aussi bien pour un travail en partie linguale qu'en partie vestibulaire.



FRA\_CYPC  
Longueur : 20 mm  
Ø3 mm



FRA\_CYLV2\*  
Longueur : 25 mm  
Ø4,5 mm



FRA\_CYCV2\*  
Longueur : 13 mm  
Ø4,5 mm



FRA\_CYPL  
Longueur : 25 mm  
Ø4 mm

\* Disponible jusqu'à épuisement du stock.

# Équipement électroportatif

## Fraises pour Polyfloat Compact

Les 8 fraises pour Polyfloat Compact HDE bénéficient d'une diamantation de haute qualité ( $\pm$  900 chevaux).  
Le diamant minimise les dommages aux muqueuses.

La gamme HDE est composée de 3 types de fraises :

### FRAISES BOBINES COMPACT



BOBINE Ø14  
FRA\_BD14FC



BOBINE BUCCALE Ø18\*  
FRA\_BBD18FC\*



OCCLUSALE  
FRA\_ODFC  
Ø13 mm

### FRAISES CARIES COMPACT



CONIQUE LONGUE  
FRA\_COLDFC  
Longueur : 13 mm

### FRAISES DIASTÈMES COMPACT



DIASTÈME COURTE  
FRA\_CPCDFC  
Longueur : 20 mm  
Ø3 mm



DIASTÈME LONGUE  
FRA\_CPLDFC  
Longueur : 25 mm  
Ø4 mm

### AUTRES FRAISES COMPACT





REVERSE DISC 15° Ø36  
FRA\_BD15D36FC



BUCCALE\*  
FRA\_BDFC\*

\* Disponible jusqu'à épuisement du stock.

# Compact vs Classic

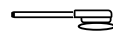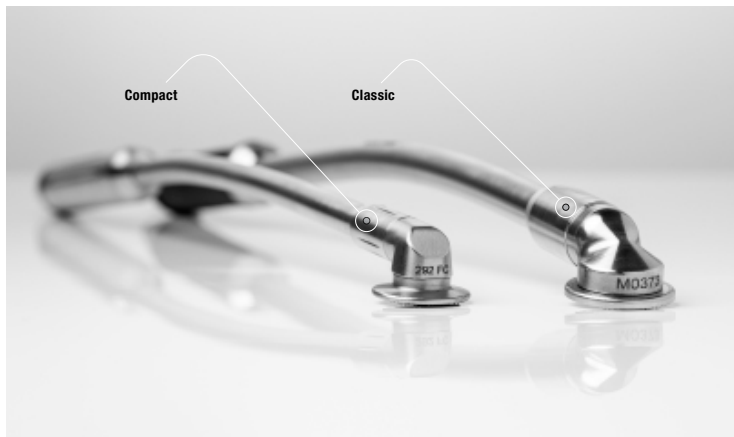

Une tête plus fine pour un accès facilité en fond de bouche



Un corps plus fin pour une meilleure visibilité



Plus de légèreté pour une meilleure ergonomie

## CLASSIC

La solution pour une dentisterie de routine

Flexxidisc  
CLASSIC



Polyfloat  
CLASSIC



## COMPACT

La solution pour une dentisterie avancée

Flexxidisc  
COMPACT



Polyfloat  
COMPACT



2 manches faciles d'entretien pour fraises Compact :

Standard : Acier inoxydable = 180 g

En option : Polymère = 44 g



# Équipement électroportatif

Fraises 11<sup>èmes</sup>

Les fraises 11<sup>èmes</sup> sont spécifiquement conçues pour faciliter le travail du praticien en fond de bouche grâce à une tête compacte, longue et étroite dont la hauteur réduite (1 cm) permet un accès optimum. Différentes longueurs et formes de fraises ainsi que 3 options de protection sont disponibles, vous permettant de concevoir votre propre fraise.

- La diamantation permet de réduire facilement les surdents.
- Facilité d'entretien (pas de graissage nécessaire).
- La poignée caoutchouc ergonomique permet une prise en main optimale.

Ce matériel ne peut être vendu sans protection.

## 1 Choisissez la longueur et la forme de la fraise

### FRAISE 11<sup>ÈMES</sup> LONGUE DROITE

FRA\_F11D

- Longueur : 56 cm
- Ø9 mm



### FRAISE 11<sup>ÈMES</sup> LONGUE CONCAVE

FRA\_F11C

- Longueur : 54 cm
- Ø9 mm



### FRAISE 11<sup>ÈMES</sup> LONGUE CONVEXE

FRA\_F11CX

- Longueur : 54 cm
- Ø9 mm



### FRAISE COURTE DROITE (pour poneys)

FRA\_FP

- Longueur : 43 cm
- Ø9 mm



Spécialement conçue pour le traitement des poneys, elle s'est également avérée très utile pour les camélidés.

## 2 Choisissez le carter de protection de la fraise



**CARTER  
OUVERT**

FRA\_COF11G



**CARTER  
FERMÉ**

FRA\_CFF11G



**CARTER FERMÉ  
LARGE\***

FRA\_COLF11G\*

\* Disponible jusqu'à épuisement du stock.

# Équipement électroportatif

## Fraises à Axe

### FRAISE MAXILLAIRE\*

FRA\_F1\*

- Longueur : 29 cm
- Ø15 mm / 5 mm
- S'utilise avec ou sans extension

- 106 à 108 & 206 à 208 :

Sa partie cylindrique permet un profilage rapide et efficace.

- 109 à 111 & 209 à 211 :

Sa tête conique facilite l'accès là où le passage entre la joue et les dents est plus étroit.

La protection conique appliquée contre la joue évite tout contact avec la muqueuse et guide la fraise le long des arcades dentaires.



### FRAISE MANDIBULAIRE\*

FRA\_F2\*

- Longueur : 28 cm
- Ø20 mm
- S'utilise avec ou sans extension

- 306 à 308 & 406 à 408 :

Ses côtés effilés facilitent l'accès et le profilage des 6<sup>èmes</sup>.

- 309 à 311 & 409 à 411 :

Sa protection est spécialement conçue pour atteindre les molaires en fond de bouche sans abîmer la muqueuse.



### FRAISE D'ANGLE\*

FRA\_F3\*

- Longueur : 15 cm
- Ø16 mm
- S'utilise sans extension

Cette fraise est très versatile. Grâce à la partie conique de sa tête diamantée, elle peut être utilisée sur les 6<sup>èmes</sup>.



### FRAISE BOULE Ø20

FRA\_F4

- Longueur : 15 cm
- Ø20 mm
- S'utilise sans extension

Sa forme sphérique offre confort et facilité pour le profilage des 6<sup>èmes</sup>.



### FRAISE BOULE Ø8\*

FRA\_F4D8\*

- Longueur : 16 cm
- Ø8 mm
- S'utilise sans extension



\* Disponible jusqu'à épuisement du stock.

# Équipement électroportatif

## Fraises à Axe

### FRAISE DISQUE

FRA\_F5

- Longueur : 15 cm
- Ø50 mm
- Épaisseur disque : 1,75 mm
- Épaisseur protection : 8 mm
- S'utilise sans extension



### FRAISE DISQUE COUPANTE

FRA\_F5F

- Épaisseur disque : 0,80 mm
- Épaisseur protection : 8 mm
- S'utilise sans extension



Conçues pour le travail sur les incisives et l'équilibrage des condyles.

### FRAISE 6<sup>ÈMES</sup>

FRA\_F6C

- Longueur : 16 cm
- Ø18 mm
- S'utilise sans extension



L'arrondi de la fraise permet un profilage aisé des 6<sup>èmes</sup>.

Idéal pour le profilage des excroissances prononcées grâce au diamètre important de sa tête.

### POIGNÉE ERGONOMIQUE POUR FRAISE 6<sup>ÈMES</sup> ET FRAISE D'ANGLE

FRA\_PAFBS

- Améliore la préhension
- Très facile à installer
- Vis de fixation fournie



Cette poignée est spécialement conçue pour optimiser la prise en main de la fraise 6<sup>èmes</sup> (FRA\_F6C) ou de la fraise d'angle (FRA\_F3).

### FRAISE VESTIBULAIRE\*

FRA\_F6\*

- Longueur : 29 cm
- Ø15 mm



S'utilise avec un ouvre-bouche très peu ouvert : meilleur confort pour le patient et le praticien (accès facilité). Sa protection très dégagée garantit un bon positionnement sur la dent.

### FRAISE CANINE\*

FRA\_FSC\*

Fraise dédiée exclusivement pour un profilage simple et facile des canines grâce à sa bobine miniature.



\* Disponible jusqu'à épuisement du stock.

## EXTENSION

Facile et rapide à mettre en place, l'extension permet de travailler sans mettre les mains dans la cavité buccale et suivre sans risque les mouvements de tête du patient.

Son utilisation est fortement conseillée avec les fraises maxillaires, mandibulaires, vestibulaires ainsi que les Flexxidisc / Polyfloat standard.

## EXTENSION LONGUE

FRA\_EXTL

- Longueur : 28 cm
- Inox qualité alimentaire



## BROSSE INOX

- Nettoie rapidement et efficacement les fraises diamantées
- Support en inox en option

## BROSSE NUE

ACC\_BNUE



## BROSSE AVEC SUPPORT

ACC\_BAS



HDE propose une gamme de mallettes avec des espaces de rangement conçus pour chaque instrument.

## MALLETTE TROLLEY

RAN\_MTSP

- Résistance aux chocs
- Dimensions intérieures en cm (L x l x H) : 52,1 x 28,7 x 19,1
- Dimensions extérieures en cm (L x l x H) : 55,9 x 35,6 x 22,9
- Poids (à vide) : 5,2 kg
- Livrée sans plaque de fond pour fraises (disponible en option)



## MALLETTE TROLLEY NOIRE

RAN\_MT2

Mallette spécialement conçue pour le set sectioning.

- Résistante aux chocs
- Dimensions intérieures en cm (L x l x H) : 54,6 x 31,8 x 29,4
- Dimensions extérieures en cm (L x l x H) : 60,5 x 39,4 x 33,6
- Poids (à vide) : 6,35 kg



## MALLETTE À INSTRUMENTS STANDARD

RAN\_MALR

- Mousse protectrice
- Polypropylène
- Dimensions en cm (L x l x H) : 81 x 27 x 11
- Poids (à vide) : 2,5 kg



# DENTALSCOPE ÉQUIN



# Dentalscope équin

Fabriqué en Allemagne, le Dentalscope HDE permet un examen plus approfondi de la cavité buccale et des arcades dentaires permettant une meilleure détection des pathologies dentaires.

## AVANTAGES POUR LE PRATICIEN

- Diagnostic clair et précis
- Meilleur suivi du patient
- Service additionnel
- Améliore la compréhension des propriétaires

## CARACTÉRISTIQUES

- 3 options :
  - Écran TV
  - Connecteur USB sans fil pour smartphone / tablette / ordinateur (option)
  - Moniteur sans fil (option)
- Fichier image : .JPG
- Fichier vidéo : .AVI MPEG, ce format permet de couper et d'isoler les séquences vidéo que vous souhaitez conserver
- Longueur : 692 mm
- Dimensions de la tête en mm (l x H) : 17 x 17,2
- Tête arrondie sur le dessus
- Acier inoxydable
- Poids : 360 g
- Caméra : Résolution vidéo : 704 x 576 pixels, Système vidéo PAL, 4 lentilles de verre, Angle de visio de 70°, Lumière LED à 5.000 K
- Autonomie de la batterie : 1h (pleine charge)



- 1 Dentalscope      2 Chargeur      3 Câble vidéo d'1,5 m      4 Mallette de rangement



"Plug & Play"



Léger et  
portatif



Robuste



Options sans  
fil



Images &  
Vidéos claires



Autonomie  
1h

# Dentalscope équin

3 sets avec différentes options pour répondre à vos besoins.

## SET DE BASE

ACC\_CD

Dentalscope avec câble vidéo (1,5 m).



## SET DE BASE + CONNECTEUR USB SANS FIL

ACC\_CDUSB

Dentalscope avec connecteur USB sans fil pour smartphone / tablette / ordinateur.



## SET DE BASE + MONITEUR SANS FIL

ACC\_CDM

Dentalscope avec moniteur sans fil DVR 10" système d'enregistrement sur carte SD (vidéo & image).



## PISTOLET POUR DENTALSCOPE ÉQUIN

ACC\_PRC



## PÂTE DENTAIRE MONOBODY

ACC\_PD1

La pâte dentaire MonoBody est un matériau d'empreinte à base de silicone, avec système de mélange automatique.

Type de matériau :

- Polyvinylsiloxane, élastomère polymérisant par réaction d'addition et surface activée, viscosité moyenne
- Base : iceblue
- Catalyseur : blanc
- ISO 4823, Type 2, consistance moyenne



# Dentalscope équin

## TABLEAU COMPARATIF

|                                                        | Set de base | Set de base +<br>Connecteur USB<br>sans fil | Set de base +<br>Moniteur sans fil |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Dentalscope                                            | ✓           | ✓                                           | ✓                                  |
| Chargeur                                               | ✓           | ✓                                           | ✓                                  |
| Câble vidéo (longueur : 1,5 m)                         | ✓           | ✓                                           | ✓                                  |
| Mallette de rangement et transport                     | ✓           | ✓                                           | ✓                                  |
| Connecteur USB + Logiciel gratuit                      |             | ✓                                           |                                    |
| Moniteur DVR 10" + Carte SD +<br>Mallette de rangement |             |                                             | ✓                                  |

## PRÉSENTATION VIDÉO

Scannez le QR code pour découvrir le Dentalscope équin en vidéo !



# STOMATOLOGIE





# Diagnostic

Kit Diagnostic

## KIT DIAGNOSTIC

KIT\_DIAG

- Miroir dentaire anti-buée (longueur 47,5 cm, Ø50 mm)
- Crochet dentaire classique (47 cm)
- Repousse-joue
- Pistolet de rinçage (200 mL)
- Seau inox 12 L



Un kit complet regroupant les outils essentiels pour diagnostiquer les pathologies dentaires équine.

## MIROIR DENTAIRE AVEC POCHETTE

STO\_MI

- Longueur : 47,5 cm
- Diamètre : Ø50 mm
- Angle : 25°
- Miroir anti-buée
- Inox qualité alimentaire




## MIROIRS DENTAIRES

- Longueur : 41 cm
- Diamètres disponibles :
  - Ø20 mm STO\_MDD20
  - Ø30 mm STO\_MDD30
  - Ø40 mm STO\_MDD40
- Angle : 25°
- Miroir anti-buée
- Inox qualité alimentaire



## SONDE DENTAIRE

- Longueur : 45 cm
- 2 modèles : gauche et droite
- Idéale pour préparer l'extraction de molaires
- Inox qualité alimentaire

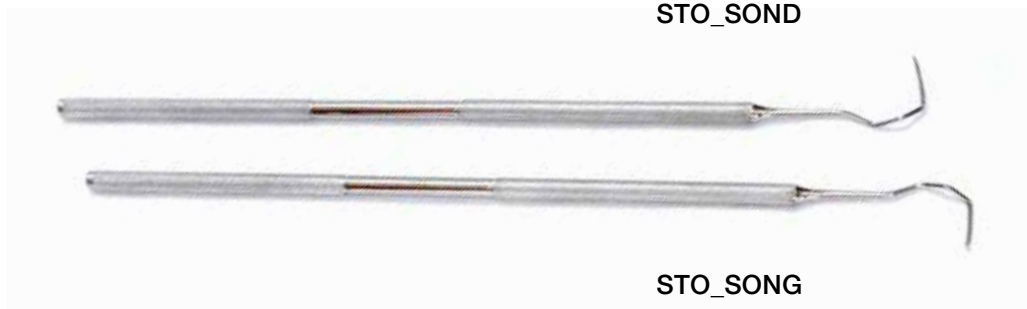

## SONDE DENTAIRE GRADUÉE

STO\_SE

- Permet de sonder et évaluer les tissus périodontiques
- Longueur totale : 41 cm
- Inox qualité alimentaire



### CROCHET DENTAIRE CLASSIQUE

STO\_CD

- Très résistant
- Se désinfecte facilement
- Longueur : 47 cm
- Hauteur du crochet : 2 cm
- Inox qualité alimentaire



### CROCHET DENTAIRE - PETIT MODÈLE

STO\_CDF

- Longueur totale : 41 cm
- Diamètre du crochet : 2 cm
- Inox qualité alimentaire



Grâce à leurs formes et leurs longueurs, les crochets dentaires permettent de dégager les résidus de nourriture des espaces interdentaires.

### SONDE D'EXPLORATION COURTE

STO\_DES

- Longueur : 19,5 cm
- Hauteur du crochet : 2,7 cm
- Inox qualité alimentaire



### SONDE D'EXPLORATION LONGUE

STO\_DEL

- Longueur : 43 cm
- Inox qualité alimentaire



### SUPPORT K-FILE & H-FILE COURT

- Inox qualité alimentaire
- Vendu sans K-file ou H-file



Court droit

STO\_KFHSS



Court angulé

STO\_KFHSA

### SUPPORT K-FILE & H-FILE LONG

- Inox qualité alimentaire
- Vendu sans K-file ou H-file



Long droit

STO\_KFHLS



Long angulé

STO\_KFHLA

## K-File & H-File Holders

### SONDES DENTAIRE GRADUÉES - 31 MM

STO\_LBP140

**NOUVEAU**

Ces Sondes Dentaires Graduées sont très utiles pour vérifier la profondeur des poches parodontales. Vendues par lot de 6 unités. A utiliser sur nos supports K-File & H-File.



### K-FILES DENTAIRE #70 - 25 MM

STO\_KF70

**NOUVEAU**

Ces K-Files 70 sont très utiles pour éliminer les résidus alimentaires entre les molaires et les incisives. Les files ont un profil strié. Vendues par lot de 6 unités. A utiliser sur nos supports K-File & H-File.



### PICS DENTAIRE DIASTÈME #70 - 25 MM

STO\_DDP70

**NOUVEAU**

Ces Pics Dentaires Diastème sont très utiles pour les procédures parodontales et permettent d'éliminer les résidus alimentaires entre les molaires et les incisives. Vendues par los de 6 unités. A utiliser sur nos supports K-File & H-File.





# Extraction Dents de Loup & Incisives

Extraction Dents de Loup



## KIT BURGESS OUVERT

BUR\_KIT

- 4 recharges ouvertes (Ø 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm)
- 1 manche
- 1 rallonge courbe
- 1 rallonge droite
- 1 tige pour recharge
- 1 tige pour rallonge
- 1 mallette Burgess



## KIT BURGESS FERMÉ

BUR\_KITF

- 4 recharges fermées (Ø 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm)
- 1 manche
- 1 rallonge courbe
- 1 rallonge droite
- 1 tige pour recharge
- 1 tige pour rallonge
- 1 mallette Burgess



## KIT LECLAIR

KIT\_EXT

- Élévateur dent de loup n°1
- Élévateur dent de loup n°2
- Élévateur droit
- Curette 8 mm
- Pince gouge 45°
- Davier contre coudé 17 cm
- Davier courbe 45° bec ouvert 20 cm
- Boîte à instruments (25 x 15 x 5 cm)

## KIT BURGESS (à composer)

BUR\_KITM

- 1 manche
- 1 rallonge courbe
- 1 rallonge droite
- 1 tige pour recharge
- 1 tige pour rallonge
- 1 malette Burgess



Composez votre propre kit Burgess en choisissant parmi les recharges suivantes :

## RECHARGES FERMÉES

6 diamètres (4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm)

BUR\_FE14

BUR\_FE10

BUR\_FE6



BUR\_FE12

BUR\_FE8

BUR\_FE4

## RECHARGES OUVERTES

4 diamètres (6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm)

BUR\_OU12

BUR\_OU8



BUR\_OU10

BUR\_OU6

## ADAPTATEUR DENTS DE COCHON

BUR\_ADB

Bien que les dents de cochon soient très occasionnelles, cet adaptateur vous aidera à les extraire facilement et en toute sécurité.



## ÉLÉVATEURS DENTS DE LOUP

- Longueur : 15 cm
- Inox qualité alimentaire

3 éleveurs vestibulaires



STO\_EDL20V3.5



STO\_EDL20V5.5



STO\_EDL20V7.5

3 éleveurs linguals



STO\_EDL20L3.5



STO\_EDL20L5.5



STO\_EDL20L7.5

Également vendus par set de 6 : STO\_S6EDL



## ÉLÉVATEURS DENTS DE LOUP

- 5 modèles disponibles : courbé gauche, courbé droit et droit
- Inox qualité alimentaire



STO\_ED  
15 cm

STO\_ECG  
15 cm

STO\_ECD  
15 cm

Travail rostral et caudal  
STO\_EDL2  
14 cm



Travail vestibulaire et lingual  
STO\_EDL  
14 cm

Horse Dental Equipment propose une large gamme de petits daviers en acier inoxydable pour répondre à vos besoins.

### DROIT BEC FERMÉ

DAV\_DBF

Longueur : 15 cm



### COURBE BEC FERMÉ

DAV\_C90BF

Longueur : 15 cm



### COURBE BEC OUVERT

DAV\_C90BO

Longueur : 15 cm



### CONTRE-COUDÉ BEC FERMÉ

DAV\_CTC

Longueur : 17 cm



### DROIT BEC OUVERT

DAV\_DBO

Longueur : 15 cm



Également vendus par set de 5 : DAV\_SET5

### DROIT BEC COUDÉ

DAV\_DBC

Longueur : 19 cm



### DAVIER 45°

DAV\_C45BO

Longueur : 20 cm



Sa tête à 45° permet l'extraction de la dent de loup sans être gêné par la muqueuse. Sa dimension assure un confort optimal lors de l'extraction.

## CURETTES

- Inox qualité alimentaire
- Curette 2 mm     STO\_CUR2
- Curette 4 mm     STO\_CUR4
- Curette 6 mm     STO\_CUR6
- Curette 8 mm     STO\_CUR8



## PINCE GOUGE 45°

STO\_PG45

| Longueur : 20 cm



L'inclinaison à 45° permet d'atteindre plus facilement les muqueuses, sans être gêné, ni par les lèvres, ni par les branches de l'ouvre-bouche.

## PINCE GOUGE

STO\_PIN

| Longueur : 16 cm



## PINCE GOUGE ARTICULÉE 15°

STO\_PGD15

- Longueur : 24 cm
- Inox qualité alimentaire



## PINCE GOUGE ARTICULÉE 30°

STO\_PGD30

- Longueur : 23 cm
- Inox qualité alimentaire



## GOUGE GRAND MODÈLE

STO\_GOU

- Longueur : 29 cm
- Diamètre de la tête : 10 mm



## GOUGES

- Inox qualité alimentaire
- 2 versions (droite et courbe)
- 3 diamètres : 6 mm, 8 mm, 10 mm
- Longueur : 22,5 cm

### GOUGES DROITES



### GOUGES COURBES



## MARTEAU AVEC EMBOUTS INTERCHANGEABLES

STO\_MEI

- Longueur : 17 cm
- Diamètre : 2,6 cm
- Poids : 0,320 kg



## DAVIER SÉPARATEUR INCISIVES

DAV\_DSI

- Longueur : 18 cm
  - Ouverture de la poignée : 28 mm
  - Largeur de la tête : 17 mm
  - Inox qualité alimentaire
- Idéal pour l'extraction des incisives.



## DAVIER ERGONOMIQUE

DAV\_E300

- Longueur : 30 cm
  - Inox qualité alimentaire
- Idéal pour l'extraction des incisives.



## DAVIER INCISIVES BEC DE CANARD

DAV\_DF

- Longueur : 25 cm
  - Inox qualité alimentaire
- Idéal pour l'extraction des incisives.





# Extraction Molaires

Extraction Molaires

## DAVIER ALLIGATOR

STO\_PA

- Longueur : 39,5 cm
- Longueur du pic : 4 cm
- Inox qualité alimentaire



Pour extraire les aliments et les résidus dentaires dans les espaces interdentaires.

## PIC DENTAIRE

- Longueur : 46,5 cm
- Hauteur : 4 cm
- Largeur de la poignée : 8 cm

La poignée garantit une meilleure prise en main.  
Permet de couper les ligaments avant l'extraction.



Pic dentaire rostral et caudal (modèle en T)

STO\_PICTPI



Pic dentaire lingual et vestibulaire (modèle en L)

STO\_PICLPI



## DAVIER DENTS DE LAIT REYNOLDS

DAV\_DL

- Longueur : 40 cm
- Inox qualité alimentaire



Son manche ergonomique et sa tête ajustée facilitent l'extraction des coiffes.

## DAVIER DENTS DE LAIT HEWSON

DAV\_DH

- Longueur : 40,5 cm
- Inox qualité alimentaire



## DAVIER DENTS DE LAIT ARTICULÉ

DAV\_DLD

- Longueur : 32,5 cm
- Largeur de la tête : 3 cm
- Inox qualité alimentaire



# Stomatologie

## DAVIER ESPACE INTERDENTAIRE

DAV\_ESPI

- Longueur : 53,5 cm
- Inox qualité alimentaire



Extraction Molaires



Cet instrument mobilise la molaire à extraire en prenant appui sur les molaires adjacentes.

## DAVIER À MOLAIRE AVEC VIS

DAV\_MV

- Longueur totale : 53,5 cm
- Hauteur possible : de 1,5 à 3,5 cm
- Inox qualité alimentaire



## DAVIER À MOLAIRE SANS VIS

DAV\_M

- Longueur totale : 53,5 cm
- Inox qualité alimentaire



Grâce à sa vis ajustable et démontable qui fait office de levier, ce davier garantit un confort optimal lors de l'extraction de molaires.

## FULCRUM

- Longueur : 43 cm
- Manche qualité inox, inserts qualité laiton
- 2 modèles différents



Les fulcrums servent de levier pour le davier à molaire. Leurs différentes hauteurs et formes facilitent le travail au fur et à mesure de l'extraction.

## DAVIER À FRAGMENTS - 4 MORS

DAV\_F4ML

- Longueur : 53,5 cm
- Poids : 1,8 kg
- Inox qualité alimentaire

Son angle a été spécialement conçu pour faciliter l'extraction des molaires.



## DAVIER À FRAGMENTS - 3 MORS

- Longueur : 53,5 cm
- Poids : 1,8 kg
- 2 versions différentes (droite et gauche)
- Inox qualité alimentaire



### VERSION DROITE

DAV\_F3B



### VERSION GAUCHE

DAV\_F3BG



La prise se fait sur 3 points et épouse parfaitement le fragment lorsqu'il est cassé en forme triangulaire.

Le côté avec les 2 pointes se cale dans le creux de la dent sur le côté gauche ou droit (selon le davier) et la troisième se positionne sur la partie fragmentée.

## DAVIER À FRAGMENTS - 2 MORS

DAV\_F2M

- Longueur : 53,5 cm
- Poids : 1,8 kg
- Inox qualité alimentaire



Un davier long nez pour les petits fragments de molaires. Le diamètre et la longueur du nez permettent de saisir et de retirer très facilement les fragments à l'intérieur de l'alvéole dentaire.

## BOÎTE À INSTRUMENTS

ACC\_BI

- Dimensions en mm (L x l x H) : 250 x 150 x 50
- Poids (à vide) : 0,7 kg
- Inox qualité alimentaire



## PISTOLET ANESTHÉSIE LOCALE

ACC\_PAL

- Pour une application parfaite de l'anesthésie intraligamentaire
- Forme ergonomique, stérilisable jusqu'à 134°C
- Pour cartouche de 1,8 mL
- Un tour de levier de déverrouillage correspond à 0,2 mL



## TRÉPANS

3 diamètres :

- 19 mm STO\_T19MM
- 22 mm STO\_T22MM
- 25 mm STO\_T25MM

Vendus à l'unité.



# OUVRE-BOUCHES & ACCESSOIRES



# Ouvre-bouches

## OUVRE-BOUCHE OPTIMUM (platines vendues séparément)

OB\_OPT

- Poids : 3,4 kg (avec platines)
- Ouverture : 15,5 cm
- Lanières biothane
- Inox qualité alimentaire



Sécurité et confort : 29 crans de sécurité et de larges branches très dégagées assurent un confort optimal à la fois pour le praticien que pour le patient.



## OUVRE-BOUCHE STANDARD (platines vendues séparément)

OB\_STA

- 6 crans de sécurité
- Poids : 3 kg
- Lanières biothane
- Inox qualité alimentaire



Convient aussi pour les poulains jusqu'à deux ans.

# Ouvre-bouches

## OUVRE-BOUCHE PONEY OPTIMUM (platines vendues séparément)

OB\_OPTP

- Lanières biothane
- Inox qualité alimentaire



## OUVRE-BOUCHE PONEY (platines vendues séparément)

OB\_PON

- 5 crans de sécurité
- Poids : 2,3 kg
- Ouverture : 7 cm
- Lanières biothane
- Inox qualité alimentaire



## PLATINES POUR OUVRE-BOUCHE PONEY BÈGUES CLASSIQUES

OB\_PLAPBC



## PLATINES POUR OUVRE-BOUCHE PONEY

OB\_PLAP



## OUVRE-BOUCHE GUNTHER

OB\_GUN

- Poids : 1,9 kg
- Inox qualité alimentaire



## SAC DE TRANSPORT

RAN\_SR

| Dimensions (L x l x H) : 42 x 20 x 28 cm



# Ouvre-bouches

Nos platines s'utilisent sur les ouvre-bouches Optimum et Standard - Inox qualité alimentaire.

## PLATINES CLASSIQUES

**Standard**  
OB\_PLAC



**Large**  
OB\_PLAL



Comme l'arceau, ces platines facilitent le travail en partie vestibulaire et maintiennent l'écartement des branches.

## PLATINES BÈGUES

**Standard**  
OB\_PLABC



**Large**  
OB\_PLABL



Platines élargies et pleines pour un accès facilité en bouche.

## PLATINES POUR INCISIVES

OB\_PLAI



Spécialement conçues pour un travail en toute sécurité sur les incisives.

# Ouvre-bouches

## OUVRE-BOUCHE INCISIVES

OB\_INC

- Tube en PVC souple
- Bande élastique ajustable



## ARCEAU DE MAINTIEN POUR MILLENIUM & OPTIMUM

OB\_ARCE



- Conçu pour un travail sur les incisives
- S'installe très facilement et assure un bon confort au cheval

## REPOUSSE-JOUE

OB\_RJ

- Poids : 0,25 kg
- Hauteur : 17 x 10 x 5 cm

Le repousse-joue permet une meilleure visibilité lors du diagnostic avant et après l'intervention.



# RÂPES MANUELLES



# Râpes manuelles

## RÂPE CAUDALE DIAMANTÉE

RAP\_CAU

- Matière abrasive : Diamant D852
- Longueur totale : 57 cm
- Longueur platine : 50 mm
- Largeur platine : 28 mm
- Hauteur platine : 3 mm

Poignée pistolet en caoutchouc pour une prise en main optimale.

Sa très faible épaisseur permet d'accéder sans problème à la partie caudale des 11<sup>èmes</sup>.



## SERPENTINE DIAMANTÉE

RAP\_SDIA

- Longueur : 17 cm
- Largeur : 2 cm
- Épaisseur : 0,5 cm

Indispensable pour toute finition en bouche. 2 tailles de grains différentes sur un seul support.



## SERPENTINE TUNGSTÈNE

RAP\_STUN

- Longueur : 30 cm
- Largeur : 2,5 cm



## RÂPE 20" FERMÉE

RAP\_50F-DN125P

- Longueur : 50 cm
- Largeur de la tête : 22 mm
- Angle de la tête : 10°

Cette râpe est très utile pour accéder aux 11<sup>èmes</sup>.



## RÂPE 20" DROITE

RAP\_50D-DN325

- Longueur : 50 cm
- Largeur de la tête : 32,5 mm
- Angle de la tête : 0°

Cette râpe est la plus versatile. Elle peut être utilisée à la fois sur l'arcade mandibulaire & maxillaire ainsi qu'en partie linguale & buccale.



## RÂPE 20" OUVERTE

RAP\_50O-DN325

- Longueur : 45 cm
- Largeur de la tête : 32,5 mm
- Angle de la tête : 15°

Cette râpe est très utile pour travailler sur les prémolaires & molaires.



## RÂPE 15" PONEY OUVERTE

RAP\_38O-DN225P

- Longueur : 38 cm
- Largeur de la tête : 22 mm
- Angle de la tête : 15°

Cette râpe est très utile pour travailler sur les prémolaires & molaires des poneys.



# Râpes manuelles

## Recharges pour râpes manuelles

### RECHARGES TUNGSTÈNE

- Recharge tungstène 50 mm (à visser)
- Recharge tungstène 50 mm (à coller)
- Recharge tungstène 80 mm (à visser)
- Recharge tungstène 80 mm (à coller)

REC\_V5TU  
REC\_C5TU  
REC\_V8TU  
REC\_C8TU



### RECHARGES TUNGSTÈNE OVALES

- Recharge carbure de tungstène ovale 32 mm (à visser)
- Recharge carbure de tungstène ovale 56 mm (à visser)

REC\_DN125P  
REC\_DN225P



## Accessoires

### POCHETTES DE RANGEMENT POUR RÂPES

- Pochette râpe droite longue 60 cm RAP\_PRDL
- Pochette râpe droite courte 50 cm RAP\_PRDC



### MALLETTE À INSTRUMENTS STANDARD

RAN\_MALR

- Longueur : 81 cm
- Largeur : 27 cm
- Hauteur : 11 cm
- Mousse protectrice

Utile pour transporter et protéger les râpes manuelles.



# ACCESSOIRES



# Accessoires

## LAMPE CHIRURGICALE LED AVEC MALLETTE

ACC\_LCV3

- Temps de fonctionnement d'environ 4 heures
- Batterie rechargeable (temps de charge d'environ 4 heures)
- Version Européenne (chargeur USB disponible)
- Distance de travail : 420 mm
- LED : 3 W / 60 000 lx
- Intensité lumineuse : 5500 Kelvin
- Durée de vie des LED (50 000 heures)
- Poids (de la lampe) : 280 g
- Livrée dans sa mallette



Cette lampe chirurgicale est facile d'utilisation, légère et sans fil.

Lampe réglable en hauteur et focalisable ce qui assure ainsi un éclairage optimal dans la bouche du cheval.

## LAMPE MAGNÉTIQUE

OB\_LOBV5

- Support magnétique intégré
- Connexions renforcées
- Pile : LR14 ou LR20
- Flux lumineux : 130 lx
- Angle : 170°



# Accessoires

L'Hydrojet II est l'outil indispensable pour tout praticien dentaire équin intéressé par un instrument polyvalent pour le rinçage efficace des diastèmes et le rinçage de la bouche.

## HYDROJET II\*

ACC\_SHJ2\*

L'Hydrojet II comprend :

- Hydrojet II avec batterie et chargeur
- Buse de rinçage
- Buse de diastème
- Tube d'eau de 6 m
- 1 contenant d'1 L
- Sac de transport



L'Hydrojet II a été complètement redessiné pour faciliter le travail avec plusieurs nouvelles fonctionnalités intelligentes :



Connecteurs de buse en laiton rapide & facile



Régulation du débit d'eau de 0,75 à 1,5 litre/minute



Indicateur du niveau de batterie



Buse de rinçage courbée



Pointe de diastème arrondie



Batterie déplacée sur le dessus

## CARACTÉRISTIQUES :

- Pression de l'eau : 7 bars
- Autonomie de la batterie : 2h en usage continu
- Temps de charge : 1,5 - 2 heures
- La buse pour diastèmes est parfaite pour rincer les diastèmes et éliminer les résidus alimentaires interdentaires. Sa longueur et sa forme permettent un accès facile à l'arrière de la bouche.
- La buse de rinçage est destinée au nettoyage général de la bouche tout au long des différentes étapes du traitement dentaire. Sa forme spécifique incurvée s'adapte naturellement à la bouche.

\* Disponible jusqu'à épuisement du stock.

# Accessoires

## PISTOLET DE RINÇAGE

ACC\_PR200ML

- Contenance : 200 mL



## SERINGUE DE RINÇAGE

ACC\_SERIN

- Contenance : 400 mL

ACC\_SR600ML

- Contenance : 600 mL



## SEAU INOX

ACC\_SI12L

- Contenance : 12 L
- Fond de seau protégé par un caoutchouc
- Inox qualité alimentaire



## PÂTE DENTAIRE

STO\_PDD

- Pâte dentaire pour les espaces interdentaire (diastèmes)
- 2 composants à mélanger




# Accessoires

## SUPPORT TÊTE OSCILLANT

ACC\_STO

- Poids : 5,45 Kg
- Hauteur min-max : 111-180 cm
- Largeur du support : 50 cm
- Aluminium
- Déhoussable et lavable

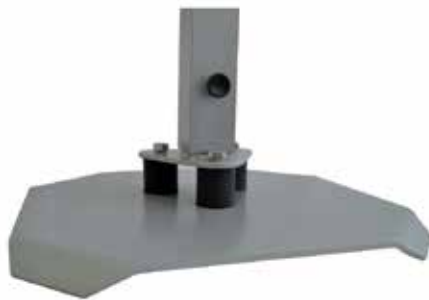

Grâce au système oscillant, le mât suit naturellement les mouvements du cheval sans risque de blessure.

## BLOC DE SOINS DENTAIRES

- Bloc de 100 feuilles de soins (dont 50 copies carbone)
- L'ensemble des soins dentaires prodigués sur une fiche de soin détaillée et complète

Version française: ACC\_BSDF

Version anglaise : ACC\_BSDGB



## LIVRE : «LA DENTISTERIE ÉQUINE»

ACC\_LDE

- Auteurs : Holger Schlemper - Isabell Herold - Tilman Simon
- Format : 21 x 30 cm
- Pages : 184
- Année de publication : 2014
- Langue : French
- Éditeur : "Point Vétérinaire - Collection Atlas"



## MASQUE ALTERNATIF

ACC\_KHM

- Kit incluant un masque et 3 rouleaux de 70 feuilles pour 100 jours de filtration (filtre à changer toutes les 3 heures d'utilisation)
- Qualité protection chirurgicale
- Lavable et réutilisable à volonté
- Haute performance de filtration  
3 µm --- 99.6 %\*  
1 µm --- 99.3 %\*
- Étanchéité et ergonomie optimales



# Recommandations d'entretien

Vous venez d'acquérir du matériel professionnel de qualité.  
Voici quelques recommandations permettant d'en optimiser l'utilisation et la durée de vie.

## RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

- Votre équipement doit toujours être propre et sec avant d'être rangé.
- HDE préconise au moins 1 révision annuelle (ou tous les 500 chevaux) de votre matériel au sein d'un centre technique homologué\*.
- HDE ne couvre pas les dommages causés par l'utilisation d'eau de javel sur l'ensemble du matériel.
- Retrouvez l'ensemble de nos précaunisations dans la notice d'utilisation des produits.



## FRAISES DIAMANTÉES

- 1 - Mettre en marche le moteur et la fraise.
- 2 - Faire fonctionner à vide et à vitesse élevée la fraise (tête en bas), afin d'évacuer l'eau.
- 3 - Appliquer la brosse inox HDE sur la tête diamantée en fonctionnement.
- 4 - Poursuivre jusqu'à élimination complète du dépôt de dentine.
- 5 - Nettoyer avec un chiffon imbibé d'eau claire et d'un produit désinfectant.
- 6 - Bien sécher avec un chiffon doux et propre.
- 7 - Ranger la fraise à l'endroit prévu dans votre mallette propre et sèche.

La fraise est résistante aux projections d'eau, ne pas immerger dans l'eau.  
Utiliser de l'eau claire sans produit corrosif ni détergent.  
Utiliser uniquement la brosse inox HDE.

## FLEXIBLE

- 1 - Nettoyer la gaine extérieure avec une éponge humide.
- 2 - Bien sécher avec un chiffon doux, propre et sec.
- 3 - Détacher le flexible du moteur et de la fraise en fin de travail.
- 4 - Ranger le flexible dans votre mallette propre et sèche.

Bien veiller à ne pas imprimer un rayon de courbure excessif sur le flexible.



## MOTEUR

- 1 - Mettre le moteur hors tension.
- 2 - Nettoyer le moteur avec une éponge humide.
- 3 - Bien sécher avec un chiffon doux, propre et sec.
- 4 - Ranger le moteur dans votre mallette propre et sèche.

HDE recommande l'utilisation du moteur à vitesse moyenne (vitesse 3).

## MALLETTE

- 1 - Nettoyer la mallette avec une éponge humide.
- 2 - Bien sécher avec un chiffon doux, propre et sec.
- 3 - Stocker dans un endroit propre et ventilé.

Bien veiller à ouvrir la mallette de temps en temps, afin d'assurer une bonne ventilation de votre matériel.



\* Liste disponible sur demande.





## GAMME COMPACT

Plus de légèreté pour une meilleure ergonomie !



### **HDE North America**

11492 County Road 64 - 3/4  
Greeley, CO 80631  
USA  
T + 1 (970) 442-3601

### **HDE France**

ZI de Bellevue - 14 rue Blaise Pascal  
35220 Châteaubourg  
FRANCE  
T + 33 (0) 299 007 129

### **HDE Vet UK**

The Pavilions, Avroe Cres  
Blackpool FY4 2DP  
UNITED-KINGDOM  
T + 44 7549 665192

[www.horse-dental-equipment.us](http://www.horse-dental-equipment.us)

[www.horse-dental-equipment.com](http://www.horse-dental-equipment.com)

[www.horse-dental-equipment.com](http://www.horse-dental-equipment.com)